

INSTRUCCIONES DE DESCONEXIÓN DE LA BOMBA 5-FU

Se le ha dado de alta con una bomba 5-FU que le está administrando quimioterapia.

Una vez que se vació la bomba, haga los siguientes pasos para desconectarla y enjuagar el puerto.

MATERIALES NECESARIOS

- Un par de guantes (no se muestran)
- Bolsa para desechar quimio (no se muestra)
- Un conector Equashield hembra (**FC-1**)
- Dos jeringas con agua salina para enjuagar
- Una jeringa con Heparin para enjuagar



Una bomba 5-FU lista para desconectarse.



Conector hembra, jeringas con agua salina, y jeringa con Heparin, lo que necesitará para desconectar la bomba. (No se muestran los guantes ni la bolsa para desecho).



[Presione para ver las instrucciones en video, o visite:](#)

vimeo.com/412738662




INSTRUCCIONES

1. Prepárese haciendo lo siguiente:
 - i. Lávese las manos y póngase los guantes.
 - ii. Abra cada una de las jeringas y empuje el aire hacia afuera.
 - a. No importa si sale un poco de agua salina por la punta.
 - b. Tape nuevamente cada jeringa para mantenerlas limpias.
 - iii. Abra la pinza de la bomba, mueva la línea al centro de la pinza, luego cierre la pinza de la bomba.
 - iv. Abra la pinza del puerto situada en la parte superior de la línea y manténgala abierta para enjuagar.
 - v. Tome la primera jeringa con agua salina y el conector hembra de su equipo. Quite la tapa. Conéctela al conector hembra como si fuese un tornillo.

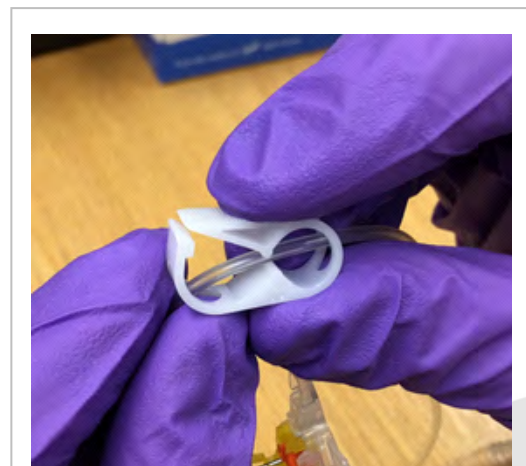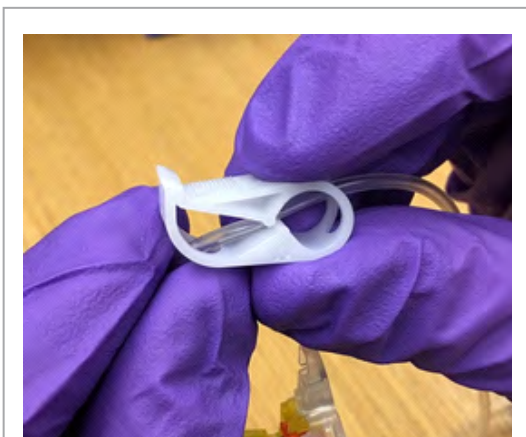


2. Desconecte los conectores macho y hembra:
 - i. Donde se alinean las líneas, presione en las tres líneas que están más espaciadas entre ellas, esta es la palanca del conector macho (LL-1).
 - ii. Mientras presiona en el conector macho (LL-1), jale el conector hembra (FC-1) para desconectar.
 - iii. Deje el conector macho (LL-1) conectado a la sonda del puerto.
 - iv. NOTA: No permita que el conector macho le toque el pecho, esto podría contaminarlo (ensuciarlo).

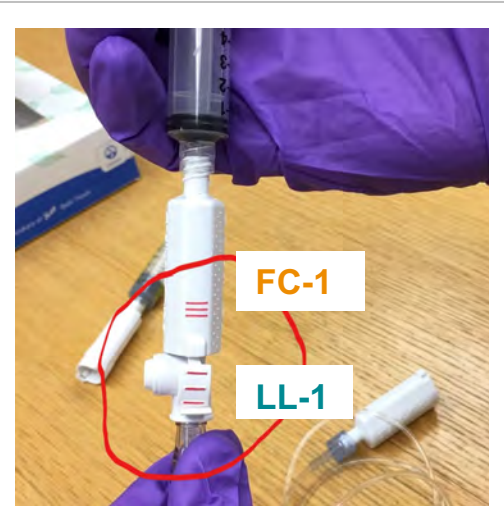


Paso 3i. Líneas rojas alineadas y el conector hembra y macho están presionados uno contra el otro.

3. Enjuague la línea haciendo lo siguiente:
 - i. conecte la jeringa con agua salina junto para enjuagar con el conector hembra (FC-1) al conector macho (LL-1) conectado al puerto
 - a. alinee las líneas rojas y empuje los conectores juntos
 - ii. presioné el émbolo en la jeringa con agua salina para enjuagar hasta que se vacíe.
 - a. no debe de sentir resistencia
 - b. cierre la pinza del puerto
 - iii. desenrosque la jeringa, pero deje el conector hembra (FC-1) conectado a la sonda.
 - a. Va a utilizar el mismo conector hembra (FC-1) para las próximas dos enjuagadas.

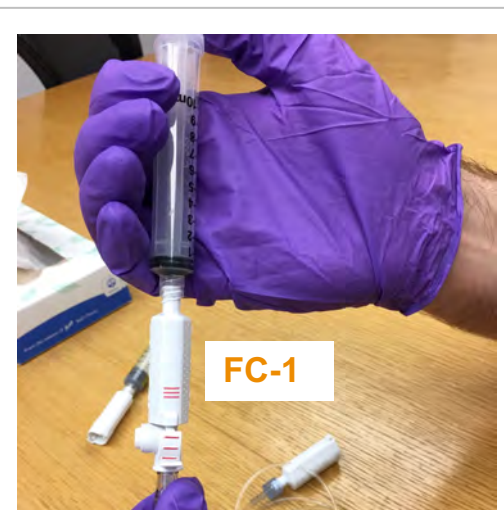


Paso 3ii. Presione el émbolo en la jeringa de agua salina para enjuagar.

4. Enjuague la línea nuevamente con la segunda jeringa de agua salina para enjuagar:
 - i. De su equipo, quite la tapa de la segunda jeringa de agua salina para enjuagar.
 - ii. Conecte la jeringa de agua salina para enjuagar junto con el conector hembra (FC-1) conectado al puerto:
 - a. abra la pinza del puerto.
 - b. presione el émbolo en la jeringa de agua salina para enjuagar hasta que se vacíe.
 - c. cierre la pinza.
 - d. desenrosque la jeringa, pero deje el conector hembra (FC-1) conectado a la sonda.

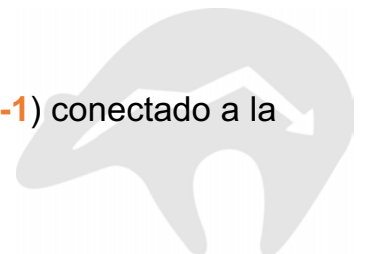

e. va a utilizar el mismo conector hembra (**FC-1**) para la última enjuagada.

5. Enjuague la línea una tercera vez con la jeringa con Heparin para enjuagar:
 - i. Quite la tapa de la jeringa con heparin para enjuagar.
 - ii. Enrosque la jeringa con heparin para enjuagar a el conector hembra (**FC-1**) conectado al puerto:
 - a. abra la pinza del puerto
 - b. presione el émbolo en la jeringa con heparin para enjuagar hasta que se vacíe

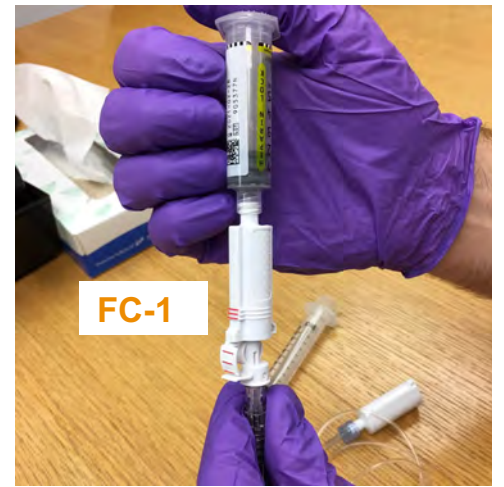

Paso 5iib. Jeringa con heparin para enjuagar alineada y conector hembra.

6. Remueva el vendaje y el puerto, haciendo lo siguiente:
 - i. Remueva el vendaje ubicado encima del puerto.
 - ii. Presione las alas de mariposa transparentes del puerto con la mano izquierda (si es zurdo, utilice la mano derecha).
 - iii. Jale las alas de mariposa amarillas directamente hacia arriba con la mano derecha (si es zurdo, utilice la mano izquierda).
 - iv. Asegúrese que el seguro este enganchado jalando las alas de la mariposa transparente de las alas de la mariposa amarilla hasta que escuche o sienta un clic, y de esta manera la aguja no se pueda salir.
 - v. Aplique la bandita sobre el puerto.
7. Coloque la bomba vacía 5-FU junto con la sonda y el conector hembra (**FC-1**) en la bolsa para desechar quimio.
 - i. Lleve con usted la bolsa para desechar quimio a su próxima cita. Nosotros desecharemos por usted la bomba vacía, la línea y el conector hembra (**FC-1**).

